

保証書  
GUARANTEE

●この保証書は、ご購入日から下記期間中に故障が発生した場合に、  
本書無償保証規定の内容で無償修理を行うことをお約束するものです。  
詳細は無償保証規定(P.26)をお読みください。

商品名： リフチューン  
形式：  
製造番号：  
ご購入年月日： 西暦 年 月 日

お客様名	
ご住所	
お電話	
販売店名	
住所	印
電話	

見本

MADE IN JAPAN

保証期間：ご購入日より1年間

発売元

 **伊藤超短波株式会社**  
ビューティー営業部

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8  
TEL.048-254-1028 FAX.048-254-1029

L I F T U N E

User's Manual

家庭用複合フェイシャル美容機器  
リフチューン  
取扱説明書

- このたびは、リフチューンをご購入いただき誠にありがとうございます。
- 使用方法をご理解いただいた上、弊社推奨の化粧品をご使用ください。
- ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。  
その後はいつでも見られるところに大切に保管してください。
- 保証書は「ご購入年月日、販売店名」等の記入を必ずお確かめください。

保証書付

# INDEX

■安全上のご注意	3~9
■セット内容	10
■各部の名称	11
■ご使用前に	12~13
■トリートメントの前に	14
・トリートメントの注意(その1)	14
■操作の仕方	15~20
・各モードの説明	16
・LEDフォトセラピー	18
・通知音	19
・電池残量の確認	19
・充電機の残量不足時	19
・トリートメントの注意(その2)	20
■より効果的なトリートメント方法	21~22
■日常の点検・お手入れ・保管	23~26
・トリートメント後には	23
・定期点検のお願い	24
・仕様	25
・アフターサービスについて	25
・無償保証規定	26
■保証書	裏表紙

安全に正しくお使いいただくために

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危険を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをした場合に想定される内容を、危険・警告・注意の3つの区分にしています。
- この説明書では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危険を未然に防止するために、本文中に色々な図記号や絵表示を示しています。

 <b>危険</b>	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が生じる切迫の度合いが想定される内容を示しています。
 <b>警告</b>	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性、あるいは物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
 <b>記号は注意</b>	△記号は、危険・警告・注意を促す内容です。 (左図は、特定しない一般的な危険・警告・注意の通告に使用)
 <b>記号は禁止</b>	○記号は、禁止の行為です。 (左図は、特定しない一般的な禁止の通告に使用)
 <b>記号は行為を強制・指示</b>	●記号は、行為を強制する内容です。図の中に具体的な強制や指示の内容が記載されています。 (左図は、特定しない一般的な強制や指示に使用)

 **危険**

-  次のような人には使用しない。また、自覚症状のある人に対しては、必ず医師と相談した上で使用する。
  - 心臓疾患の人  
身体のトラブルのおそれがあります。
-  オーバートリートメントはしない。  
身体に危害を与えるおそれがあります。
-  下記のような医療機器と併用しない。
  - ペースメーカー等の体内埋込型電気機器
  - 人工心肺等の生命維持用電気機器
  - 心電計等の装着型の医用電気機器
 医療機器の誤作動を招くおそれがあります。

 **警告**

-  次のような人には使用しない。また自覚症状のある人に対しては、必ず医師と相談した上で使用する。
  - 医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人
  - 急性疾患の人 ●皮膚病の人 ●妊娠中の人 ●貧血症の人
  - アレルギー反応の起きやすい人 ●悪性腫瘍の人
  - 38度以上の有熱性疾患の人 ●感染症疾患の人
  - 血圧異常の人(高血圧症の人) ●結核性疾患の人 ●四肢の不自由な人
  - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
  - 低温状態の人 ●血行障害のある人
  - しばらく使用しても、効果が現れない人
  - 意思表示の出来ない人 ●アレルギー疾患の人 ●血友病疾患の人
  - 法定伝染病の人 ●知覚障害の人 ●子供・年少者
  - 顔面黒皮病の人や病的なシミのある人 ●薬を服用している人
  - 手術後間もない状態、手術部位の傷が十分に癒えていない人
  - ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人 ●アトピー性皮膚炎のある人 ●マヒのある人
  - 血液循環に問題のある人 ●心臓疾患の人(心筋梗塞、狭心症及びその危険性がある人) ●骨粗鬆症の人 ●月経時の人 ●通院中の人
  - アレルギー体質で特に肌が敏感な人 ●安静を必要としている人
  - 過度の日焼けで炎症を起こしている人 ●化膿性疾患のある人
  - 背骨に異常のある人 ●機器の使用で疼痛が激しくなる人
  - 疲労の激しい人 ●引きつけて意識を失う発作性の人
  - 出血性疾患の人 ●日焼けをしている人
  - 健康(体調)がすぐれない人 ●飲酒をしている人
  - 過度に毛細血管がもろい人 ●美容整形手術後3ヶ月以内の人
 事故・身体のトラブルのおそれがあります。

 警告

-  下記の部位には使用しない。また、自覚症状のある人に対しては、必ず医師と相談した上で使用する。
  - 月経時の腹部 ●整形手術をした部位
  - 目、口(口内を含む)、唇、耳及びその周囲 ●傷口 ●粘膜の部位
  - 肛門、陰部 ●頭部及び頭髮
  - ニキビや吹き出物で炎症を起こしている部位
  - 化粧品などで皮膚炎を起こしている部位
  - 痛覚、知覚障害を起こしている部位
  - 体内に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位
  - かゆみやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
  - 動脈怒張、萎縮性疾患を起こしている皮膚面
 事故・身体のトラブルのおそれがあります。
-  機器を修理・分解・改造しない。  
火災・やけどのおそれがあります。
-  本来の目的や用途以外には使用しない。  
事故・故障のおそれがあります。
-  AC100V以外の電源では使用しない。  
火災・感電・故障のおそれがあります。
-  機器の上に水などの入った容器を置かない。  
火災・感電・故障のおそれがあります。
-  機器に水をかけたり、水につけたりしない。  
火災・感電・故障のおそれがあります。
-  他の機器の部品を流用しない。  
やけど・故障のおそれがあります。
-  使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。  
事故・身体のトラブルのおそれがあります。
-  年少者に操作させない。  
事故のおそれがあります。

 警告

-  専用のACアダプター以外は使用しない。  
火災・故障のおそれがあります。
-  ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用する。
-  取扱説明書は、大切に保存する。
-  揮発性の高いもの(ベンジン・シンナー・除光液など)を機器の近くで使用しない。  
爆発・火災のおそれがあります。
-  電源コードについて、次のような取扱いをしない。
  - 傷つけない ●加工しない ●無理に曲げない ●ねじらない
  - 引っ張らない ●加熱しない ●重いものを載せない
 火災・感電のおそれがあります。
-  次のような場所で機器を使用・保管しない。
  - 浴室などの湿気の多い場所 ●ほこりの多い場所
  - 直射日光の当たる場所 ●水などのかかる場所
  - 傾斜、振動、衝撃のある場所 ●屋外
  - 強い電波や磁気の発生する場所 ●年少者の手の届く場所
  - 油煙、湯気の当たる場所
  - 発熱器具(ストーブなど)の近くなど高温になる場所
  - 温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)
 火災・感電・事故・故障・転倒のおそれがあります。
-  機器や電源コードに亀裂などの損傷が生じているときは、使用しない。  
火災・感電・事故・怪我のおそれがあります。
-  電源コードの着脱は、プラグ部分を持って確実に行う。  
火災・感電・ショートのおそれがあります。
-  濡れた手で機器やコードの取扱いをしない。  
感電のおそれがあります。
-  電源プラグは、コンセントへ確実に差し込む。  
火災のおそれがあります。

 警告

-  機器に異音や異常が発生したら、直ちに使用を中止し、必ず修理を依頼する。  
火災・やけどのおそれがあります。
-  機器を落としたり、破損した場合は、直ちに使用を中止し、電源スイッチを切って電源プラグをコンセントから抜き、必ず修理・点検を依頼する。  
火災・感電のおそれがあります。
-  機器に水・異物が入った場合は、直ちに使用を中止し、点検を依頼する。  
火災・感電のおそれがあります。

 注意


-  タコ足配線をしない。  
過熱・火災のおそれがあります。
-  機器を強く押ししたり、叩いたり、尖ったもので突いたりしない。  
故障のおそれがあります。
-  他の電気製品(美容機器など)と併用しない。  
誤作動のおそれがあります。
-  コンピューターなどの精密機器や携帯電話・コードレス電話の近くで使用しない。  
誤作動のおそれがあります。
-  電源コードや電源プラグが痛んでいたたり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。  
火災・感電のおそれがあります。
-  日本国外では使用しない。  
事故のおそれがあります。
-  接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人は十分に注意して使用してください。
-  幼児やご自分で意思表示ができない方へのご使用は避けてください。  
事故や体調不良を起こすおそれがあります。
-  美容以外の目的で顔や首周辺部には使用しないでください。
-  眼球及びまぶたへは使用しないでください。

 注意

-  機器を移動するときは、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
感電、事故のおそれがあります。
-  停電したときは、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。  
感電、事故のおそれがあります。
-  機器を手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
感電・事故のおそれがあります。
-  機器の手入れは、取扱説明書に従う。  
事故・故障のおそれがあります。
-  機器を手入れするときは、シンナー・ベンジン・灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉を使用しない。  
事故・故障のおそれがあります。
-  機器を高いところから落とすなどの強い衝撃を加えない。  
事故・故障のおそれがあります。
-  機器の上には物を置かない。  
故障のおそれがあります。
-  機器で遊ばせない。  
事故・怪我のおそれがあります。
-  機器の上に乗らない。  
怪我・故障のおそれがあります。
-  コード類は、足元の邪魔にならないようにする。  
断線のおそれがあります。
-  機器の周辺には可燃物(雑誌・スプレーなど)を置かない。  
爆発・火災のおそれがあります。
-  電源コードを発熱器具に近づけない。  
火災・感電のおそれがあります。
-  洗面所や浴室などの湿度の高い場所での使用はしないでください。  
濡れた手で、電源プラグの脱着は行わないでください。  
感電のおそれがあります。
-  機器の内部へ異物を入れない。  
火災・故障のおそれがあります。
-  使用時には身体から金属類(時計・ネックレス・指輪・イヤリング)を外す。  
やけどのおそれがあります。

**注意**

- ❗ トリートメントの始めは、必ず出力レベル設定スイッチで低いレベルに調節してから始めてください。  
強いショックを受ける恐れがあります。
- ❗ 電気機器を装着したままトリートメントを行わないでください。  
腕時計など時刻が狂う場合があります。
- ❗ 身体の異状や肌に湿疹、発赤、かゆみなどの異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。  
医師に相談して指示に従ってください。
- ❗ 刺激が強すぎないか常に確認し、過度な刺激感があるときは出力を下げてください。  
やけどのおそれがあります。
- ⊘ 電極に触れたまま他の金属類に触れない。  
身体のトラブルのおそれがあります。
- ❗ 出力の上げすぎに注意する。  
やけどのおそれがあります。
- ❗ 地震や雷のときは、直ちに使用を中止する。  
誤作動による火災・怪我・やけどのおそれがあります。
- 🔌 長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。  
火災のおそれがあります。
- ❗ 使用後は、電源スイッチを切って電源プラグをコンセントから抜く。  
火災・事故のおそれがあります。
- ⊘ 通電したまま放置しない。  
事故・トラブルのおそれがあります。
- ❗ 電源を切るときは、必ず所定の方法を守り、正しく行う。  
事故・故障のおそれがあります。
- ❗ 電源プラグとコンセントを定期点検する。  
火災・感電のおそれがあります。
- ❗ 機器を廃棄するときは、地方自治体の破棄処理に関する条例または規則に従う。
- ❗ 機器が汚れた場合は、柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は『中性洗剤』を布に含ませ、固く絞り、軽く拭き取ってください。(水洗い禁止)。  
故障のおそれがあります。
- ❗ 長期間使用しなかった場合、再使用する前には正常に作動するか点検をする。  
事故・故障のおそれがあります。

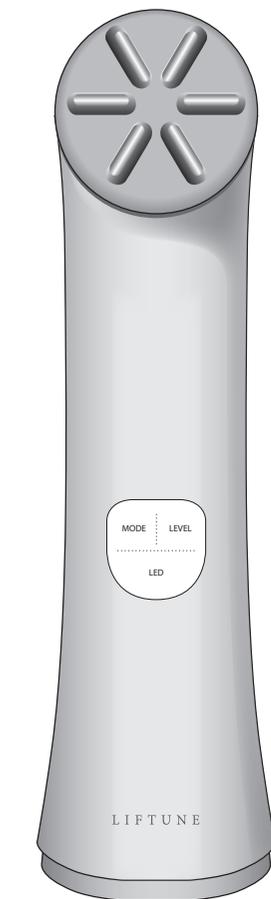


本体



置き台





取扱説明書  
(本書)

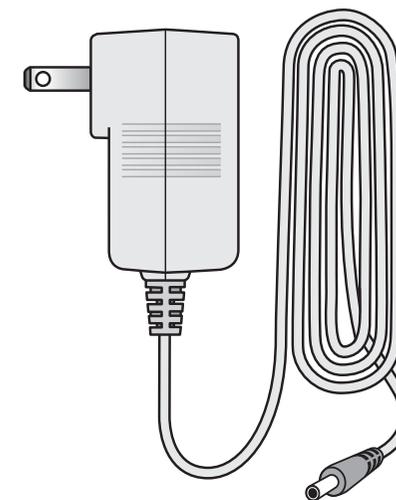

ACアダプター

- お買い求め後は、必ずセット内容をご確認ください。
- 万が一不足・不具合がございましたら販売店にご相談ください。

## 各部の名称

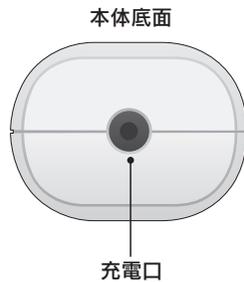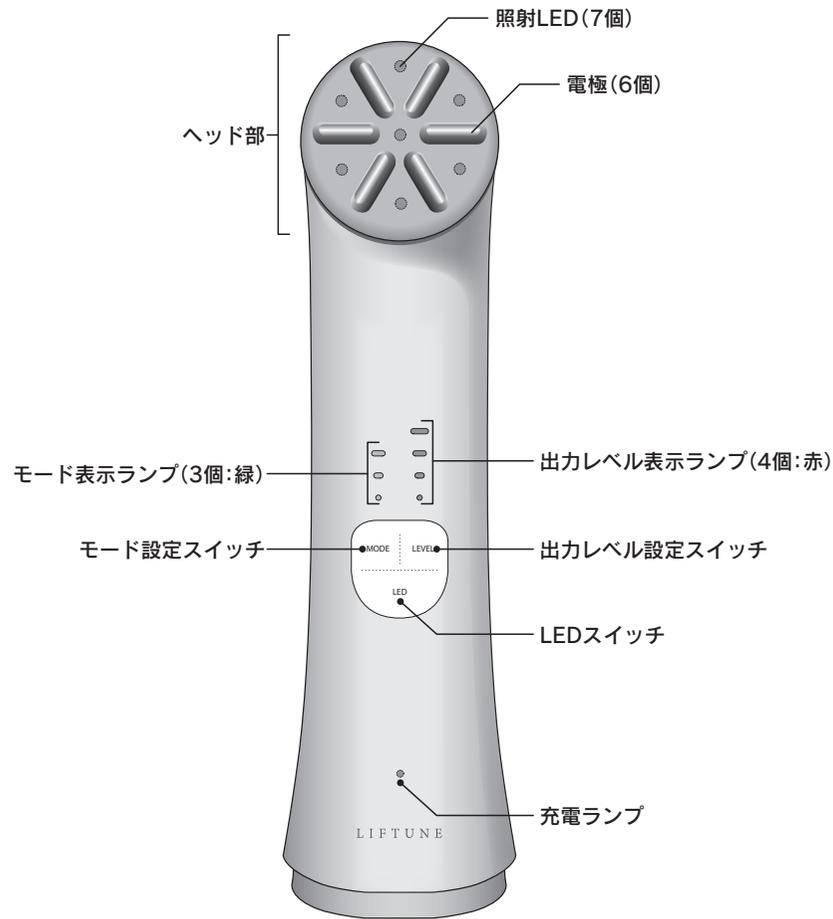


※上図のモード表示ランプおよび出力レベル表示ランプ、充電ランプ、照射LEDは、点灯時の位置を表示しています。


## ご使用の前に

### ◆美容機器(本体)を充電してください。

- 1.本体を置き台にセットしている場合、置き台から外してください。
- 2.ACアダプターの電源プラグを家庭用コンセントに差し込んでください。

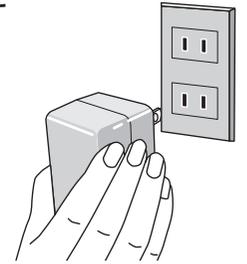

- 3.ACアダプターのジャックを本体の充電口に接続してください。

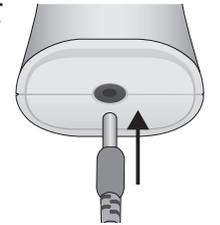

- 4.充電が開始されると、本体正面の充電ランプが点灯します。



- 5.充電が完了すると、充電ランプが消灯します。



濡れた手でのご操作は、感電する可能性があり非常に危険です。絶対におやめください。

- 充電電池の寿命を保つため、充電電池の残量表示が1つになってから充電することをおすすめします。※残量確認の方法については、P.19を参照ください。
- 充電中に本体が熱くなりますが、故障ではありません。
- ACアダプターを接続したまま使用することができます。
- ACアダプターを接続したまま使用すると、充電が行われません。充電を行う際には、電源をOFFにしてください。
- 充電電池は取り外しできません。充電電池の交換は、ご購入の販売店か、発売元にご依頼ください。


## ご使用の前に

本体を縦置きする場合は、必ず置き台をご使用ください。本体のみ縦置きした場合、転倒して破損するおそれがあります。

### ◆置き台のセット

本器の充電を行う際などに、置き台にセットすることができます。


1. 置き台にセットしながら充電をする場合、コードを本体の充電口に接続してください。
2. 置き台後部の溝にコードを通します(①)。
3. 置き台に本体を取り付けます。  
置き台の左右どちらかの溝に本体の位置を合わせてから(②)、もう片方の溝に押し込んでください(③)。

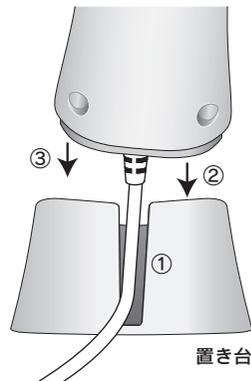

## トリートメントの前に

◇洗顔などであらかじめメイクや汚れを落としてください。

◇身につけているアクセサリーや時計・貴金属類は外してください。

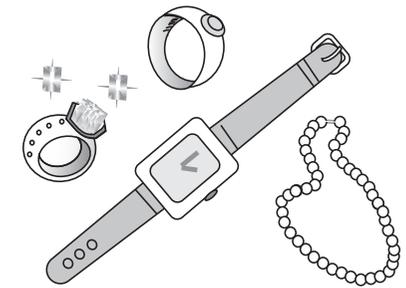

指輪 時計 ネックレス など

### ■トリートメントの注意(その1)

1. お肌のお手入れは1日1回(約10分)までが適度です。

- モードA、モードCは1週間に1~2回、モードBは毎日もしくは2日に1回位が適度です。
- 過度なお手入れはお肌のトラブルの原因になる可能性があります。
- 連続使用や、気温の高い環境でのご使用などによって本体が高温になった場合、保護機能が働き、モード表示ランプおよびレベル表示ランプが5回点滅するとともに「ピー」という通知音が鳴った後に電源が自動でOFFになります。(通知音はP.19参照)

2. お手入れは洗顔後に行なってください。

- 使用する化粧品の導入効果が上がります。(モードA、モードC使用時)
- 不純物を導入しますとお肌のトラブルの原因になる可能性があります。

3. お肌の状態は、体調によっても異なります。

- お肌の様子を見ながらご使用ください。  
湿疹、かゆみなどお肌に何らかの異常が生じた場合、使用を中止して専門医にご相談ください。
- お肌のトラブルはストレス、体質、内臓疾患、また、化粧品なども原因として考えられますので、専門医にご相談ください。

※お手入れには弊社推奨の化粧品をご使用ください。

## 操作の仕方

※初めてご使用になる前に必ず充電を行ってください。


(充電の仕方はP.12参照)

※本器使用中に本体が熱くなることがありますが、これは比較的大きな電流を使用するためであり、本体の異常ではありません。

### 1. 電源を入れる

モード設定スイッチを押して電源を入れてください。

モードA、出力1が選択された状態で電源が入ります。また、モード表示ランプおよび出力レベル表示ランプが点灯します。

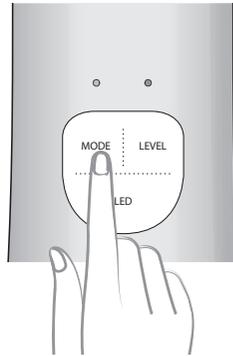

### 2. モード設定

モード設定スイッチを押すと、次のようにモードが切り替わります。

電源OFF



③モードC POL+ION




②モードB EMS



①モードA EMS+POL+ION



電源ON

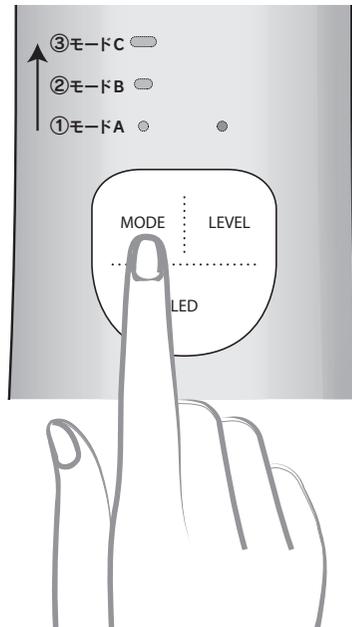

## 操作の仕方


### ■各モードの説明

モードA / EMS+POL+ION (1週間に1~2回が適度)

EMS・POL・IONを順に出力します。

モードB / EMS (毎日もしくは2日に1回位が適度)

EMSを、電極①-②間、③-④間、⑤-⑥間で順に出力します。

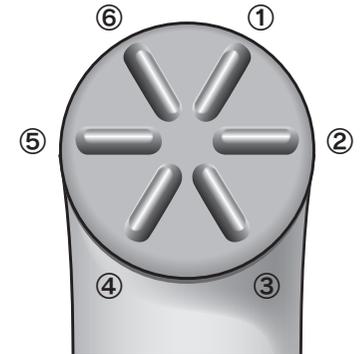

モードC / POL+ION (1週間に1~2回が適度)


POLとIONを交互に出力します。

- EMS: 電氣的筋肉刺激
- POL: ポレーション
- ION: イオン導入

## 操作の仕方

### 3. 出力レベル設定

出力レベル設定スイッチを押すと、次のように出力レベルが切り替わります。

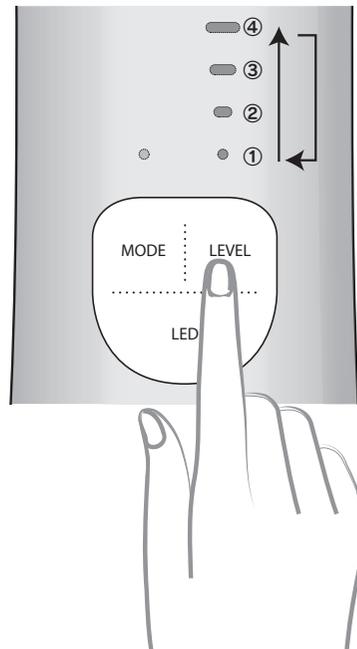


### 4. 電源を切る

出力開始(電源ON)から10分が経過すると、自動的に電源が切れます。

お手入れの途中でも、モード設定スイッチを電源OFFになるまで押すことで電源を切ることができます。(P.15参照)

※電源をOFFにすると、照射LEDも同時に消灯します。

※モードが切り替わる際、タイマーは10分に戻ります。また、出力はレベル1に戻ります。

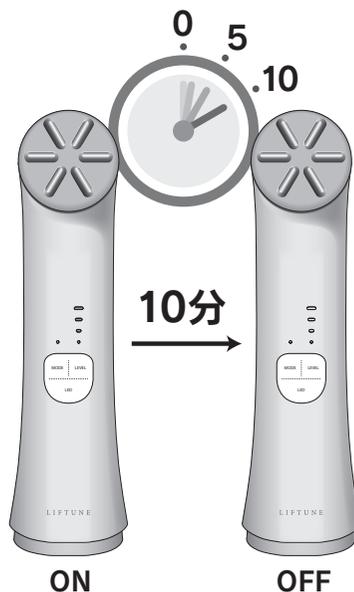


## 操作の仕方

### ■LEDフォトセラピー

#### 1. 電源を入れる

LEDスイッチを押して電源を入れてください。赤色LEDが点灯します。

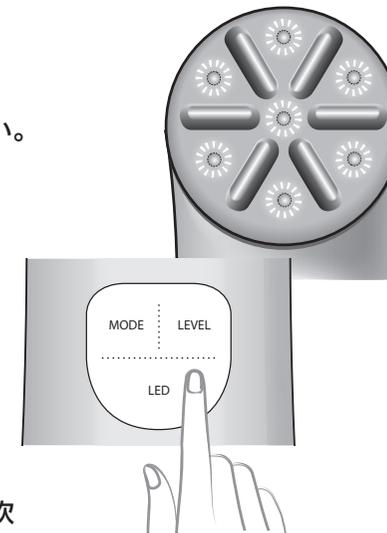

#### 2. 色の選択

LEDスイッチを押すごとに、LEDの色が次のように切り替わります。

「赤」→「青」→「黄」→「ピンク」→「4色点滅\*」→消灯

※赤、青、黄、ピンクの順に、5秒ごとに点滅します。

- LED機能は、モードA～Cの出力と同時に行うこともできます。
- モードA～Cの出力中にLEDの照射を開始した場合、タイマーはリセットされません。
- LEDの照射中にモードA～Cの出力を開始(または出力モード変更)した場合、タイマーはリセット(10分からカウントダウン開始)されます。


## ■ 通知音

以下のタイミングでそれぞれ通知音が鳴ります。

- 出力中(照射LED点灯中)に6秒ごと **ピッ**
- 出力中(照射LED点灯中)に5分経過 **ピッ**・**ピッ**
- 出力開始(照射LED点灯開始)から10分経過 **ピー**
- 充電電池の残量不足時 **ピッ**×5回・**ピー**(電源がOFFになります)
- 本体が高温になったとき **ピー**(電源がOFFになります)

## ■ 電池残量の確認

電源OFFの状態LEDスイッチを長押しすることで、電池残量を確認できます。  
電池残量に応じて、出力レベル表示ランプが右図のとおり5回点滅します。  
※充電中は、電池残量の確認はできません。

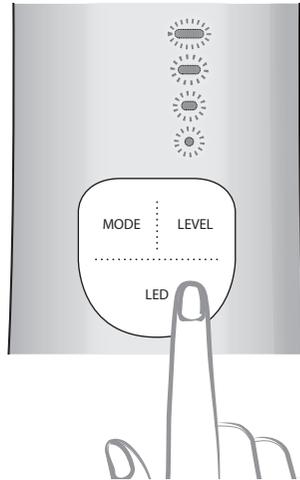

LED	電池残量
4つ	75%以上
3つ	50~75%
2つ	25~50%
1つ	25%以下

## ■ 充電電池の残量不足時

充電電池が残量不足になると、通知音が鳴った後に電源がOFFになります。

### (1) モードA~Cを使用中の場合

出力レベル表示ランプが5回点滅するとともに「ピッ」と5回鳴った後、「ピー」音と同時に電源がOFFになります。

### (2) LEDフォトセラピーのみを使用中の場合

「ピッ」と5回鳴った後、「ピー」音と同時に電源がOFFになります。

## ■ トリートメントの注意(その2)

○ 正しいヘッドの当て方

✗ 誤ったヘッドの当て方



上図の様に6つの電極全てがお肌にしっかりと密着するようにしてください。



上図の様に電極の一部しか当たっていない状態ではトリートメント効果は期待できません。

1. 6つの電極全てがお肌に密着するようにしてください。

※密着していないとトリートメント効果は期待できません。

2. ヘッドはモードAおよびモードBではポイントごとに6秒ずつ当ててください(6秒ごとにピッと鳴る通知音を目安にしてください)。モードCでは、ゆっくりスライドさせて動かしてください。

3. ヘッド部は防水加工をしていますが、化粧品は必ずお肌に直接塗布してください。

4. ヘッド部は常に清潔にしてください。



モードA、モードBではポイントごとに6秒ずつ当てます。



モードCはスライドさせます。

## より効果的なトリートメント方法

### ◆モードA・モードB(首～顔:10分目安) ※左右合わせて10分

1. 首筋からあごに向けて、●の位置に6秒ずつヘッドを当ててください(6秒ごとにピッと鳴る通知音を目安にしてください)。

- ①首筋外側 ②首筋内側  
(①～②を2回ずつ行なってください)  
※首の中央(喉仏)を避けてご使用ください。




2. フェイスラインを、あご下から耳下に向けて、●の位置に6秒ずつヘッドを当ててください。



3. 頬の内側から外側に向けて、●の位置に6秒ずつヘッドを当ててください。

- ①あごから耳の前へ  
②口角からこめかみへ  
③小鼻からこめかみへ  
(①～③を2回ずつ行なってください)

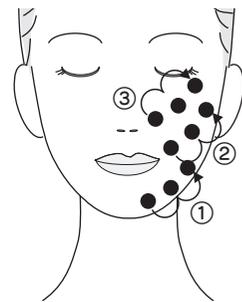

4. 額を眉上から生えぎわに向けて、●の位置に6秒ずつヘッドを当ててください。

- ①額の外側  
②額の内側  
(①～②を2回ずつ行なってください)



## より効果的なトリートメント方法


### ◆モードC(首～顔:5分目安) ※左右合わせて5分

1. 首筋からあごに向けて、ゆっくりと(1ラインを6秒で2回程度のスピードで)ヘッドをすべらせてください(6秒ごとにピッと鳴る通知音を目安にしてください)。  
※首の中央(喉仏)を避けてご使用ください。



2. 右図のように、ゆっくりと(1ラインを6秒で2回程度のスピードで)ヘッドをすべらせてください。

- ①フェイスラインをあご下から耳下へ  
②頬をあごから耳の方へ  
③頬を口角からこめかみへ  
④頬を小鼻からこめかみへ  
⑤額を眉上から生えぎわへ

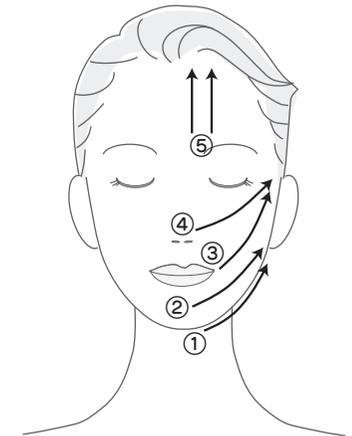

## ■トリートメント後には…

1.お肌に触れるヘッド部に付着した化粧品の残り・汚れはきれいに拭き取ってください。

- 本器のお手入れは、柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい時は『中性洗剤』を布に含ませ、固く絞り、軽く拭き取ってください。(水洗い禁止)  
また、お手入れの際は、ベンジン・シンナー・アルコール等の溶剤を使わないでください。
- 溶剤を使うと外装ケースが変形したり、塗装がはがれる恐れがあります。
- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。



■ベンジン・シンナー・アルコール等の溶剤、熱湯の使用や水洗いはしないでください。故障、外装ケースの変形、塗装の剥離の原因となります。

## 2.電源プラグとコンセントの点検

電源プラグとコンセントのほこり等は定期的に取り除いてください。



■電源プラグとコンセントの定期点検をしてください。火災や発火の恐れがあります。  
■電源プラグとコンセントのほこり等は定期的に取り除いてください。絶縁不良による火災の原因となります。

## 3.保管する時

- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 湿気やほこりの少ない場所に保管してください。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所は避けてください。
- 長期間使用しなかった機器をご使用いただく時には、取扱説明書のとおり操作を行い、正常に作動することを確認してください。

次のような場所には保管しないでください。



- 高温多湿の場所
  - ほこりの多い場所
  - 油煙や湯気の当たる所
  - 直射日光が当たる所
- 故障、火災、感電等の原因となります。

## ■定期点検のお願い

### ■ご使用中のリフチューンの点検のお願い

- こんな症状はありませんか？
- ・ACアダプターが異常に熱い
  - ・煙が出たり、異常な臭いや音がする
  - ・水や異物が入った
  - ・その他の異常や故障がある

このような症状の時は故障や事故防止のため、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店もしくは発売元に点検をご依頼ください。

## ■仕様

商 品 名	リフチューン
電 源	ACアダプター 入力電圧:100V~240V 出力電圧:DC5V 2A
消 費 電 力	2W
重 量	約180g
寸 法	208×60×60mm
ヘッド部材質	ステンレス合金
生 産 国	日本

## ■アフターサービスについて

### ●保証書について

保証書に必ず『ご購入年月日・販売店名』等の記入があることをご確認の上、内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

機器本体及び付属品の保証期間は、ご購入日より1年間とします。

### ●補修用性能部品の保有期間

本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

### ●修理を依頼される前に

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、修理をご依頼ください。

### ●故障した場合の連絡について

故障した場合は、ご購入の販売店または発売元にご連絡いただき、修理をご依頼ください。

### ●保証期間経過後の修理について

ご購入の販売店または発売元にご相談ください。

修理によって商品の機能が維持できる場合、ご希望により有償修理させていただきます。その際の送料は往復ともお客様のご負担になります。

修理後、宅配便にて、販売店またはお客様にご返送いたします。

### ●修理をお受けになる場合の注意

ご購入の販売店、または発売元に修理を依頼された場合、お見積もり後、修理を依頼された販売店またはお客様へご連絡し、ご了解を得た後修理いたします。

修理しない場合も送料はお客様のご負担になります。

### ●修理等についてのお問い合わせ

発売元 伊藤超短波株式会社 ビューティー営業部  
TEL.048-254-1028 FAX.048-254-1029

## ■無償保証規定

- 1.本保証書は、日本国内で使用される場合に限りです。
- 2.お客様名、ご購入年月日、販売店名のない場合は無効となります。
- 3.修理ご依頼の場合は、ご購入の商品と保証書を発売元にお送りください。
- 4.修理時の発送費用はお客様の実費負担となります。
- 5.保証期間中でも次の場合は原則として有償修理になります。
  - 取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障及び損傷
  - 不当な修理や改造による故障や損傷
  - ご購入後の輸送・投棄・落下などによる故障や損傷
  - 保証書の提示がない場合
  - 保証書にご購入年月日・販売店名・お客様名のご記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - 車両、船舶に搭載された場合に生じる故障や損傷
  - 火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障や損傷
  - 誤った修理をしたり、消耗品の交換をしたり、改造で生じた故障や損傷
- 6.本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。
- 7.本保証書は、本書に明示した期間・条件をもとにして無償修理をお約束するものではありません。  
保証期間経過後の修理についてご不明な点は、ご購入の販売店または発売元までお問い合わせください。  
※保証期間外及び保証適用外の故障でも実費にて修理いたします。